

Compat® Gravity

Compat® Gravity Universal Set

Compat® Gravity Universal Set on tarkoitettu letkuravinnon, nesteiden ja lääkkeiden antoon käsivaraisesti painovoimalla.

OMINAISUUDET LYHYESTI


Compat® Gravity Universal Set sisältää ENPlus-ravintoliitännän, ilmansuodattimella varustetun yleiskäyttöisen kierrekorkin, ENFit®-Y-lääkeportin ja ENFit®-distaalipään (potilaanpuoleinen letkuliitäntä).


Turvalliset liittimet: Compat® Gravity -ravinnonsiirtolaitteissa on ENFit®-liittimet, jotka täyttävät ISO 80369-3 -standardin vaatimukset. ENFit®- ja ENPlus-liittimet on suunniteltu IV-yhteensopimattomiksi väärin liitännöiden ehkäisemiseksi ja potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Elintarviketurvallisuus: Compat® Gravity-ravinnonsiirtolaitteet eivät sisällä DEHP:ta, BPA:ta tai lateksia*.

Yhteensopivuus:

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus, isokaulaiset lasi- ja muovipullot, kruunukorkkiset lasipullot
- Syöttöletkut: ENFit®
- Lääkkeenanto: ENFit®

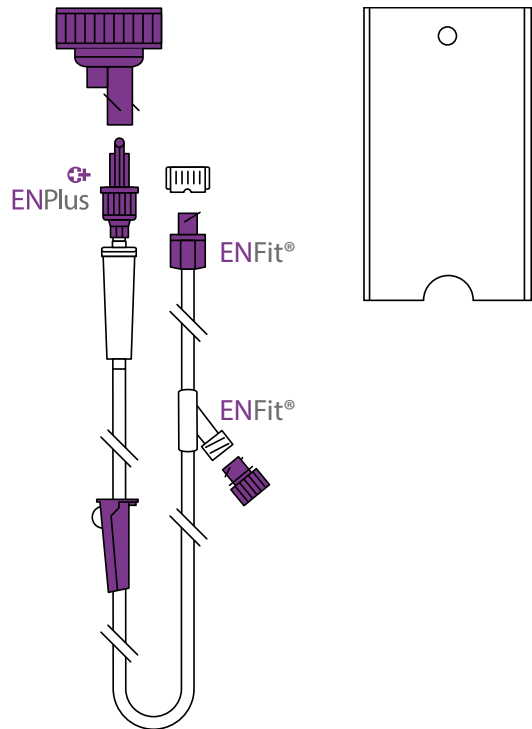

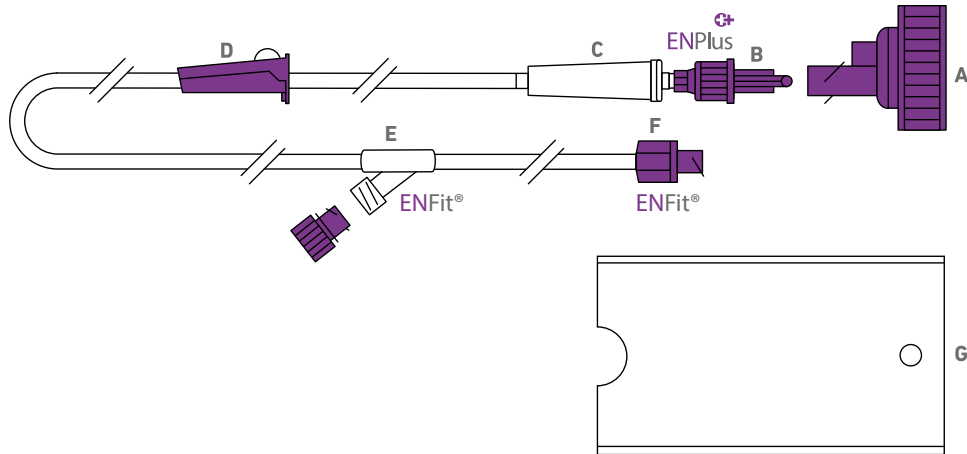

OSAT

- A** Yleiskäyttöinen kierrekorkki, jossa on ilmansuodatin ja ENPlus-portti käytettäväksi yhdessä isokaulaisten lasi- ja muovipullojen (DIN 168-1) tai kruunukorkkisten lasipullojen (EN 14634 ja EN 14635) kanssa
- B** Proksimaalinen ENPlus-liitin (ravintoliitäntä) ja kierrelukitus
- C** Tippasäiliö
- D** Rullapuristin virtauksen nopeuden säätöön tai katkaisuun
- E** ENFit®-Y-lääkeportti ja korkki
- F** ENFit®-distaalipää ja korkki (potilaanpuoleinen letkuliitäntä)
- G** Pidike 500 ml:n pullolle (valmistettu LDPE:stä)

TUOTETIEDOT

Sterilointi: Steriloitu eteenioksidilla.

Pakkaus: 30 yksittäispakkausta (39 x 39 x 13 cm).

Säilytys: Säilytys huoneenlämmössä. Suojattava auringonvalolta ja kosteudelta.

Säilyvyys: 3 vuotta valmistuspäivästä. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.

Käyttöaika: 24 tuntia. Kertakäyttöinen.

Letkun pituus: Etäisyys ravintoliitännästä potilaanpuoleiseen letkuliitännään: 180 cm.

Letkun halkaisijat: Nimellinen sisähalkaisija: 4,0 mm.
Nimellinen ulkohalkaisija: 5,4 mm.

CE-merkintä: Täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY vaatimukset. CE-sertifikaatin myöntänyt ilmoitettu laitos: TÜV SÜD (CE0123).

Ympäristönsuojelu: Grüne Punkt -merkki kertoo, että Nestlé Health Science kantaa tuottajavastuunsa ja osallistuu kierrätyksen rahoitukseen.

Materiaalit: Letkut: PVC. Materiaalit eivät sisällä DEHP:ta, BPA:ta tai lateksia*. Lisätietoja on saatavana pyynnöstä.

TILAUSTIEDOT

Compat® Gravity Universal Set -ravinnonsiirtolaitteet tilataan Oriolasta.

puhelin: 010 429 555

sähköposti: laakemyynti@oriola.fi

Tuotteen nimi	vnr-nro	Kpl/pkt
Compat® Gravity Universal Set	33 65 57	30

Lisätietoja saat Nestlé Health Sciencen edustajalta tai www.compat.com.

*Osat alittavat kokonais-DEHP:n (Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti) 0,1 %:n enimmäispitoisuuden.

Lateksia ei lisätä tietoisesti valmistusprosessin aikana.

® Ellei toisin ilmoiteta, kaikki tavaramerkit ovat Société des Produits Nestlé S.A:n omaisuutta tai niiden käyttöön on lupa. Valmistaja: Cedic Srl.

Lisätietoja ENFitistä® www.stayconnected.com.