

Compat Go® Universal Set, Compat Go® Portable Set

Compat Go® -ravinnonsiirtolaitteet on tarkoitettu enteraalisen ravintoliuoksen, nesteiden tai lääkkeiden annosteluun Compat Go® Pump -ravinnonsiirtopumpun kanssa. Compat GO® Portable Set:iä voidaan käyttää myös Compat GO® -repuun kanssa.

OMINAISUUDET LYHYESTI

Compat Go® -ravinnonsiirtolaitteissa on ENPlus-liitin ravintosäiliöön, ENFit®-kolmitieläkeportti ja ENFit®-distaalipää (potilaanpuoleiseen liitäntään).

Varmemmat liitännät: ENFit™- ja ENPlus-liittimet on muotoiltu siten, että ne ovat IV-yhteensopimattomia, mikä auttaa ehkäisemään virheliitäntöjä ja siten edistää potilasturvallisuutta.


Elintarvikehyväksytyt materiaalit: Compat Go® -ravinnonsiirtolaitteet eivät sisällä DEHP:ta tai lateksia*.

Compat Go® Universal Set

Yleiskäyttöisellä kierrekorkilla, jossa ilmansuodatin.

Yhteensopivuus:

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus, isokaulaiset lasi- ja muovipullot sekä kapeakaulaiset lasipullot
- Syöttöletkut: ENFit™
- Ruiskut: ENFit™

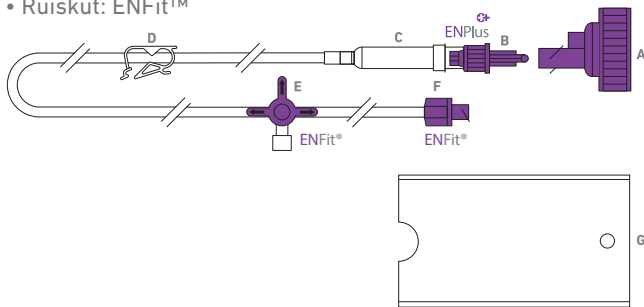


OSAT

- A** Yleiskäyttöinen kierrekorkki, ilmansuodatin ja ENPlus-portti käytettäväksi isokaulaisten lasi- ja muovipullojen (DIN 168-1) sekä kapeakaulaisten lasipullojen (EN 14634 ja EN 14635) kanssa
- B** Proksimaalinen pää (letkuravintopakkauksen liitäntään), ENPlus-liitin ("vain enteraalinen") kierrelukituksella
- C** Tippakammio
- D** Puristin (Anti-freeflow system)
- E** ENFit™-kolmitieläkeportti
- F** ENFit™-distaalipää (potilaanpuoleiseen letkuliitäntään)
- G** Pidike 500 ml:n pullolle (valmistettu LDPE:stä)

Compat Go® Portable Set

Yhteensopivuus:

- Letkuravintopakkaukset: ENPlus
- Syöttöletkut: ENFit™
- Ruiskut: ENFit™

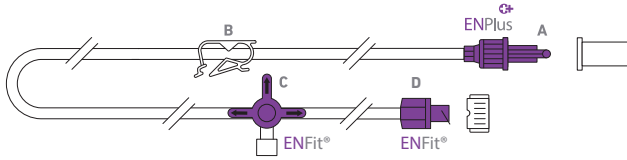

OSAT

- A** Proksimaalinen pää (letkuravintopakkauksen liitântään), ENPlus-liitin ("vain enteraalinen") kierrelukituksella
- B** Puristin (Anti-freeflow system)
- C** ENFit™-kolmitielääkeportti
- D** ENFit™-distaalipää korkilla (potilaanpuoleiseen letkuliitântään)

TUOTETIEDOT

Sterilointi: Steriloitu eteenioksidilla.

Pakkaus: Laatikossa 30 yksittäispakattua ravinnonsiirtolaitetta.

Compat GO Universal Set (39.1 x 28.8 x 20.9 cm).

Compat GO Portable Set (40 x 22 x 19 cm).

Säilytys: Säilytys huoneenlämmössä. Suojattava auringonvalolta ja kosteudelta.

Säilyvyys: 3 vuotta valmistuspäivästä. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.

Käyttöaika: 24 tuntia. Kertakäyttöinen.

Letkun pituus:

Compat GO Universal Set: Kokonaispituus ± 205 cm.

Compat GO Portable Set: ± 230 cm

Letkun halkaisijat: Nimellinen sisähalkaisija: +/- 3,5 mm.

Nimellinen ulkohalkaisija: +/- 5,0 mm.

CE-merkintä: Täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY vaatimukset. CE-sertifikaatin myöntänyt ilmoitettu laitos: TÜV Rheinland (CE0197).

Ympäristönsuojelu: Grüne Punkt –merkki kertoo, että Nestlé Health Science kantaa tuottajavastuunsa ja osallistuu kierrätyksen rahoitukseen.

Materiaali: Letkut: PVC. Materiaalit eivät sisällä DEHP:ta tai lateksia*. Lisätietoja saatavana pyynnöstä.

TILAUKSET

Compat Go –ravinnonsiirtolaitteet tilataan Oriolasta.

Sähköposti: laakemyynti@oriola.fi

Puhelin: 010 429 555

Tuote	Vnr-nro	Määrä
Compat Go® Universal Set	33 65 53	30 kpl
Compat Go® Portable Set	33 65 55	30 kpl

Lisätietoja saat Nestlé Health Sciencen edustajalta tai asiakaspalvelusta p. 010 3951 466 tai www.nestlehealthscience.fi

*Osat alittavat kokonais-DEHP:n (Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti) 0,1 %:n enimmäispitoisuuden. Lateksia tai BPA:ta ei lisätä tietoisesti valmistusprosessin aikana.

® Ellei toisin ilmoiteta, kaikki tavaramerkit ovat Société des Produits Nestlé SA:n omaisuutta tai niitä käytetään luvalla.

Lisätietoa ENFit™-tuotteista www.stayconnected.org